



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USUARIO DE LENTES DE CONTACTO BLANDAS

Lea atentamente esta información y guárdela para consultas posteriores.

Las lentes de contacto blandas, son un método eficaz para la compensación de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y vista cansada.

Estas lentes de contacto, han sido recomendadas por su Oftalmólogo u Óptico Optometrista.

Nunca utilice lentes de contacto que no hayan sido recomendadas por un profesional. El, le indicara el tiempo de reemplazo, el numero de horas de uso, la periodicidad en las revisiones que usted precisa y las soluciones de mantenimiento necesarias.

Es esencial que usted siga sus recomendaciones en todo momento.

ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES :

1. Utilice productos de mantenimiento para lentes de contacto blandas, y en ningún caso agua del grifo, mineral o soluciones destinadas a otros tipos de lentes. Siga las instrucciones de uso del fabricante y de su profesional de la visión.
2. Retire las lentes inmediatamente y consulte a su adaptador si nota alguno de los siguientes síntomas: incomodidad, dolor, ojo rojo, visión borrosa, exceso de lágrima, inflamación, sensibilidad a la luz, secreciones abundantes, cambios bruscos en la visión, halos de colores alrededor de las luces...etc. En el caso de que se le seque la lente y se quede pegada, aplique unas gotas de solución humectante antes de quitársela. Si siguiera pegada, acuda urgentemente a su adaptador.
3. No olvide que es importante realizar revisiones periódicas. Recomendamos sean cada seis meses.
4. Una buena higiene y mantenimiento de sus lentes de contacto así como de su estuche portalentes, anulará cualquier riesgo de infección ocular. Reemplace periódicamente su estuche portalentes.
5. No practique deportes acuáticos con las lentes puestas sin ponerse unas gafas que no dejen pasar el agua.
6. Póngase las lentes de contacto antes de maquillar sus ojos y quíteselas antes de desmaquillarse. Utilice productos cosméticos aconsejados para usuarios de lentes de contacto. Los maquillajes pueden colorear sus lentes.
7. Evite el contacto de las lentes con jabones, cremas, champús, lacas, u otros cosméticos ya que pueden irritar sus ojos. Cierre los ojos si utiliza laca para su cabello, ya que puede deteriorar sus lentes.
8. Recuerde quitarse las lentes de contacto antes de dormir.
9. Nunca utilice lentes deshidratadas total o parcialmente.
10. Algunos medicamentos, en especial para los ojos, están contraindicados en el uso de lentes de contacto. En caso de duda consulte con su adaptador.
11. Mantenga las lentes y los productos de mantenimiento fuera del alcance de los niños.
12. Si observara alguna anomalía en sus lentes (bordes dentados, manchas ... no las utilice y llévelas a su adaptador.



Lea atentamente las instrucciones, advertencias y precauciones.

Texto revisado en Octubre / 2011

Fabricante:

EUROLENT SERVICIOS ÓPTICOS Y OFTALMOLÓGICOS, S.L.



C/ Pinto res, 5•28923 Alcorcón. Madrid



INSTRUCCIONES DE USO

La esterilidad del blister o envase de sus lentes, se guarda hasta el momento de su apertura: Compruebe el estado de los envases nuevos por si mostraran signos de deterioro. No utilice las lentes si el blister o vial original estuviera roto, deteriorado o abierto. El envase exterior original debe guardarse hasta que se haya utilizado la última lente de su contenido.

1. Lave y enjuague cuidadosamente sus manos y séquelas con una toalla que no desprenda pelusilla.
2. Coloque una lente en la posición correcta sobre la yema del dedo.
Procure comenzar siempre con la misma lente para evitar confusiones.
3. Separe y sujete ambos párpados con los dedos y sitúe la lente sobre la córnea.
4. Presione la lente ligeramente sobre el ojo y suelte los párpados lentamente.

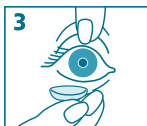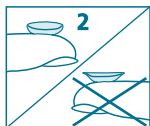

5. Para extraer la lente sujete el párpado inferior, desplace la lente suavemente hacia abajo mientras mira hacia arriba.
6. Pellizque la lente suavemente con la yema del pulgar y del índice, nunca con las uñas, y retírela.

Repita el procedimiento con la otra lente.

Si la visión es borrosa, compruebe que no haya confundido la lente derecha con la lente izquierda.

Si nota una molestia anormal, retire la lente, limpie y aclárela a fondo y compruebe si está en la posición correcta.

Si la molestia persiste, retire la lente y consulte a su Oftalmólogo u Óptico Optometrista.

CONSEJOS PARA SU MANTENIMIENTO

1. Utilice siempre las soluciones de mantenimiento indicadas para sus lentes, que le recomiende su adaptador.
2. Siga las instrucciones de uso que le indica el fabricante.
3. Las lentes deben conservarse en un estuche portalentes limpio totalmente inmersas en una solución de mantenimiento que se renovará a diario.
4. Si no utiliza las lentes durante unos días, pida consejo a su adaptador sobre su correcta conservación.
5. Eurolent recomienda para el cuidado de sus lentes, las siguientes soluciones de mantenimiento dependiendo de su reemplazo:

LENTES DE REEMPLAZO FRECUENTE	LENTES CONVENCIONALES BLANDAS
<p>Solución Única Limpiador de superficie (si es necesario) Solución Salina Gotas humectantes</p>	<p>Sistema de desinfección por peróxido Un Solo Paso Solución salina Limpiador de superficie Gotas humectantes Comprimidos enzimáticos</p>

CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. Si sus lentes son cosméticas, no utilice Sistema de desinfección por peróxido. Pueden deteriorar su color.
2. Si sus lentes tienen filtro UV, debe realizar la limpieza enzimática, disolviendo el comprimido enzimático en solución salina ya que si la realiza con solución de peróxido, puede deteriorar el filtro.

EN CASO DE RECLAMACIÓN

Póngase en contacto con su adaptador y lleve la caja o vial original junto con las lentes objeto de su reclamación.